

# TOTOKU

200万画素  
20.1型モノクローム液晶ディスプレイ


# ME201L /r

## ME Series

## CT、MRIなどの各種医用画像表示に適した 高コントラスト比 1000:1の アナログ/デジタル入力対応モデル

各種医用画像表示用に最適なアナログ&デジタル入力対応の200万画素 20.1型モノクローム液晶ディスプレイです。キャリブレーション機能によりDICOM GSDFに忠実なグレースケール表示が可能です。

*Flat Display System  
for Medical Imaging*

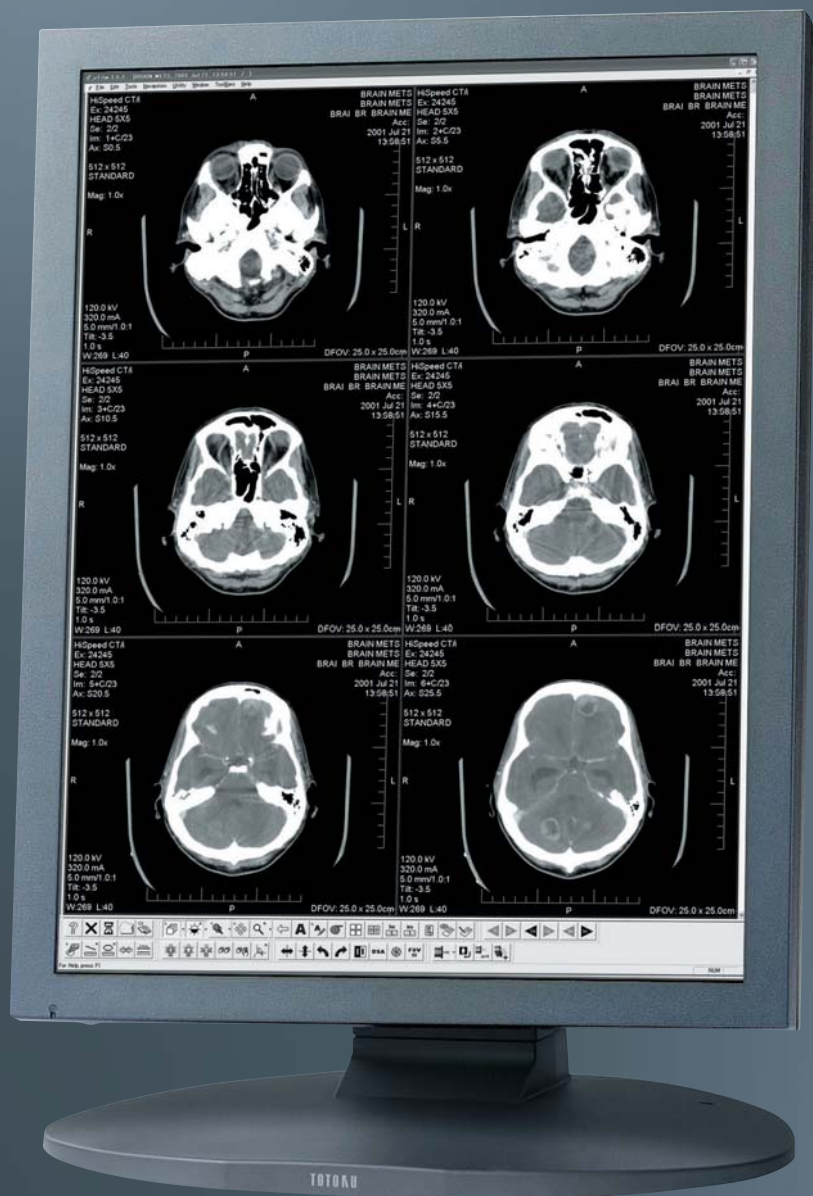

# 2

Megapixel  
Monochrome Display

20.1型	アナログ デジタル 入力	高輝度 700 cd/m <sup>2</sup>	コントラスト比 1000:1	キャリブ レーション 機能	10Bit LUT	高機能 スタンド
-------	--------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------

## 特長

## ▶ キャリブレーション機能を搭載

ガンマ特性・輝度の調整を行い、DICOM GSDFに忠実に滑らかなグレースケール表示が可能です。

※オプションのキャリブレーションキットが必要です。

## ▶ 10bit LUT (ルックアップテーブル) 搭載

グラフィックスカードから入力される8bit (256階調) データを、内蔵の10bit (1024階調) LUT が最適な階調データに変換。DICOM GSDF準拠の高精度な階調表現を実現しました。

## ▶ 輝度安定化システム λ-Sentinelを搭載

画面輝度は、バックライトの長時間使用による明るさの低下や、温度による明るさの変化で不安定になります。本機種は、独自技術により経時変化の少ない、また温度に影響されにくい安定した輝度を実現しました。

## ▶ デジタルとアナログ入力対応

アナログRGBとデジタルDVIの入力信号に対応しています。

## ▶ ワールドワイドのメディカル安全規格、EMI規格を取得

一般の情報処理機器よりも高い審査基準が適用されている北米及び欧州地域内における医用安全規格を取得し、医療機関においても安心してご使用いただける安全性と信頼性を実現しています。

## ▶ Medivisor シリーズソフトウェア

Medivisor シリーズソフトウェアは、ディスプレイ表示品質の維持管理を総合的にサポートし、高精度で安定した医用画像の提供と表示品質管理コストの削減を実現します。(オプション)

▶ 品質管理に関するガイドライン  
「JESRA X-0093<sup>-2005</sup>」に適合した出荷検査対応


本ガイドラインに基づいた出荷検査を実施し、その結果を出荷試験報告書として製品に添付しています。このため、本ガイドラインで規定されたディスプレイ設置時の受入試験が不要となりディスプレイの設置手順が簡略化されます。

## ▶ 色味を合わせて出荷するベアリングサービス

色温度(色味)管理を行い、2台の色味を合わせて出荷するベアリングサービスを実施しています。(オプション)

※詳細は、営業担当までご確認ください。

モデル名	ME201L /r
液晶パネル	方式 20.1型TFTモノクローム、Active Matrix
	表示画面サイズ 408.0mm × 306.2mm
	画素ピッチ 0.255mm × 0.255mm
表示性能	コントラスト比 1000 : 1 (Typ.)
	最大輝度 700cd/m <sup>2</sup> (Typ.)、出荷設定は410cd/m <sup>2</sup>
	視角度 170度 (上下・左右)
	表示可能解像度 640 × 480 (VGA) ~ 1600 × 1200 (UXGA)
	階調表示 1024階調 (10ビット) 中より256階調 (8ビット) 表示
インターフェース	入力信号 デジタル DVI / アナログ RGB
	プラグアンドプレイ DDC2B 対応
電源	入力電源 AC アダプター 100V~240V (-10%, +6%) 50/60Hz
	消費電力 最大約50W (パワーマネジメント機能付き)
機能	キャリブレーション 輝度、ガンマの調整 (オプションのキャリブレーションキットが必要)
	USB USB Rev. 1.1 準拠 Upストリーム (バスパワー) 1ポート, Downストリーム2ポート
適合規格	安全規格 (医用規格) UL2601-1, CSA C22.2 No.601.1, MDD/CE, FDA 510(k)
	EMI FCC-B, VCCI-B, MIC, CCC
物理的仕様	外形寸法 (スタンドを含む) ランドスケープ使用時: 453(W) × 461(H) / 523(H) × 220(D) mm ポートレイト使用時: 353(W) × 511(H) / 573(H) × 220(D) mm
	質量 約11.5kg、スタンドを除く本体のみの質量は約7.1kg
	チルトスタンド 縦横回転、チルト、スイベル機能付き
	本体取り付け部 VESA準拠 (ピッチ: 100 × 100mm)
	セキュリティ機構 盗難防止用セキュリティスロット付き (スタンド部)
付属品	ACアダプター、電源コード、DVIケーブル、VGAケーブル、シリアルケーブル、USBケーブル、取扱説明書、お客様カード

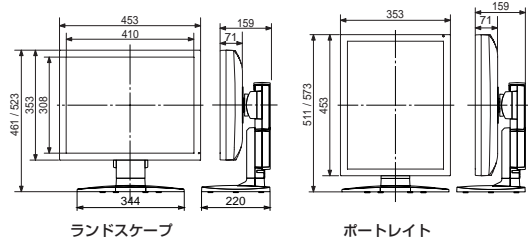

ランドスケープ

ポートレイト

※本カタログ製品は医療機器ではありません。

TOTOKUは、環境管理の国際基準であるISO14001と、品質管理の国際基準であるISO9001、ISO13485の認証を取得しています。



## 安全に関するご注意

商品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。

水・埃・湿気・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災や故障、感電などの原因となることがあります。

TOTOKU

TOTOKU 東京特殊電線株式会社 営業本部 情報機器営業部

〒169-8543 東京都新宿区大久保1-3-21 TEL.03-5273-2022 FAX.03-5273-2091

●大阪支店:06-6352-3541 ●名古屋支店:052-771-1161 ●信越支店:0268-34-5285

USA  
TOTOKU NORTH AMERICA, INC  
1425 Greenway Dr., Ste. 565  
Irving, TX 75038, U.S.A.  
TEL: +1-972-550-1888  
E-mail: info@totoku-na.com

EUROPE  
TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.  
Jakob-Krebs-Str. 124  
D-47877 Willich-Anrath Germany  
TEL: +49-2156-4918-0  
E-mail: info@totoku.de

ASIA  
TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.  
3-21, Okubo-1 Chome  
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan  
TEL: +81-3-5273-2053  
E-mail: info-idsc@totoku.co.jp

●インターネットで最新情報を提供しています。 <http://www.totoku.co.jp/display/>

●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国等における登録商標です。●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ